



## Guide for Use




1 Wash hands with mild soap and water.




2 Use mild, unscented soap or non-alcoholic wet wipe to cleanse glans and opening of urethra.




3 Open package by pulling the finger hole toward you.

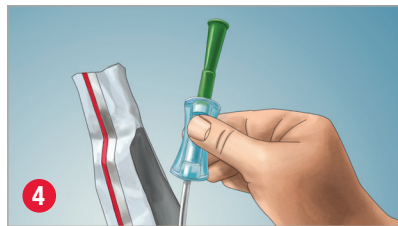

4 Hold funnel or gripper to remove catheter from package.

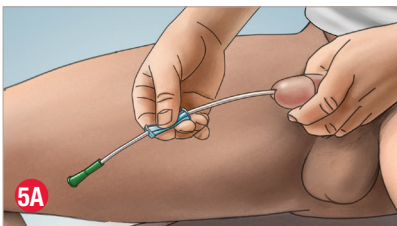


5A Pull back foreskin if present. Pull gripper away from the funnel. Hold gripper anywhere along the catheter, so you do not touch the catheter. With the penis upright, hold gripper tightly to begin inserting catheter. Slightly release gripper, and slide back towards funnel. Then hold gripper tightly again to advance the catheter. Repeat until urine starts to flow. Relax foreskin, if present.

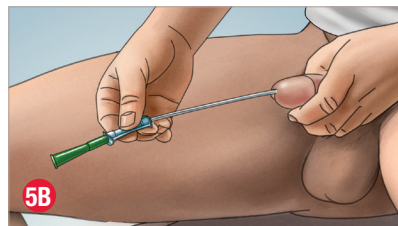

5B Alternative insertion option: keep the gripper "docked" with the funnel. With penis upright, hold gripper/funnel and insert catheter into the urethra with one hand until urine starts to flow. Relax foreskin, if present.

Once urine flow has stopped, slowly withdraw the catheter to ensure bladder is completely empty. Gently remove catheter.

Once urine flow has stopped, slowly withdraw the catheter to ensure bladder is completely empty. Gently remove catheter.

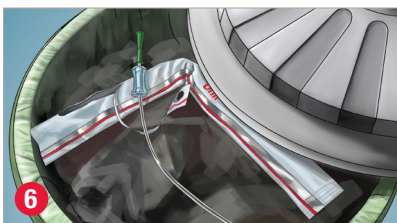

6 The catheter may be disposed in a waste bin. Do not flush catheter or package down the toilet.



7 Wash hands with mild soap and water.

Watch the Onli male instructional video:  
[www.hollister.com/en/onlimale](http://www.hollister.com/en/onlimale)

**WARNING:** To help reduce the potential for infection and/or other complications, do not reuse.

**WARNING:** If discomfort or any sign of trauma occurs, discontinue use immediately and consult your healthcare practitioner.

- Ready to use, single-use intermittent catheter
- Hydrophilic-coated, phthalate-free catheter
- 2 smooth catheter eyelets
- Color-coded funnel
- Not made with natural rubber latex
- Gripper on 16" catheter to aid insertion and support no-touch insertion technique

This intermittent catheter is a flexible tubular device that is inserted through the urethra by male, female and pediatric patients who need to drain urine from the bladder.

**PRECAUTION:** Please consult your healthcare practitioner before using this product if any of the following conditions are present:

- Severed urethra
- Unexplained urethral bleeding
- Pronounced stricture
- False passage
- Urethritis – inflammation of the urethra
- Prostatitis – inflammation of the prostate gland
- Epididymitis – inflammation of the epididymis (testicle tube)

**PRECAUTION:** Self-catheterization should follow the plan of care and advice given by your healthcare practitioner and be carried out only in accordance with the instructions for use provided. Because catheterization frequency varies by person, the recommended frequency of your catheterization should be provided by your healthcare practitioner. For any other questions about your catheterization, please contact your healthcare practitioner.

**Rx Only.** Federal (USA) Law restricts this device to sale by or on the order of a physician or other healthcare practitioner licensed under state law to order this product. Prior to use of this device, be sure to read (i) the complete information on how to use this device including Warnings, Cautions, and Instructions for Use, and (ii) all other package inserts and labels supplied with the product.

**NOTE:** Store boxes in a flat position and at normal room temperature.

This product consists of: thermoplastic gripper (16" catheter only), polyvinylchloride funnel and tubing not made with phthalates.



Hollister Incorporated  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060


[www.hollister.com](http://www.hollister.com)



## Guía de uso




**1**  
Lávese las manos.

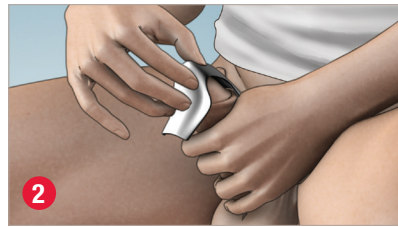


**2**  
Utilice un jabón neutro sin perfume o una toallita húmeda sin alcohol para limpiar el glande y el meato urinario.




**3**  
Abra el envase.

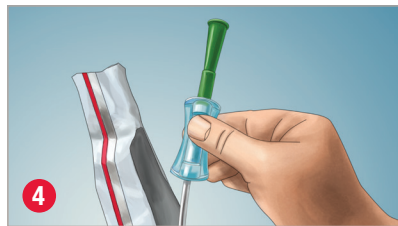

**4**  
Sujete la vía de drenaje o el mecanismo guía para sacar la sonda.

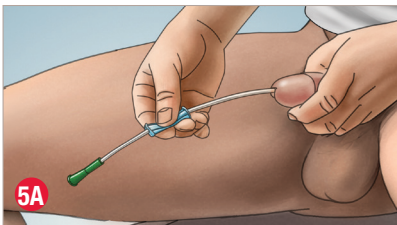


**5A**  
Retaiga el prepucio en caso de no estar circuncidado. Retire el mecanismo guía de la vía de drenaje. Sujete el mecanismo guía en cualquier punto a lo largo de la sonda, de forma que no la toque. Con el pene en vertical, sujete bien el mecanismo guía para comenzar a insertar la sonda. Abra ligeramente el mecanismo guía y deslícelo hacia atrás, hacia la vía de drenaje. A continuación, sujete de nuevo firmemente el mecanismo guía para hacer avanzar la sonda. Repita hasta que la orina empiece a fluir. Suelte el prepucio en caso de no estar circuncidado.

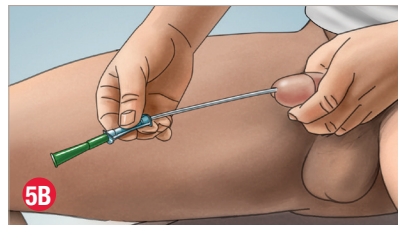

**5B**  
Opción de inserción alternativa: mantener el mecanismo guía 'bloqueado' con la vía de drenaje. Con el pene en posición vertical, mantenga el conjunto de mecanismo guía / vía de drenaje e inserte el catéter en la uretra con una mano hasta que la orina empiece a fluir. Suelte el prepucio en caso de no estar circuncidado.

Una vez que la orina deje de fluir, retire suavemente la sonda para asegurarse de que haya vaciado completamente la vejiga. Retire la sonda con cuidado.

Una vez que la orina deje de fluir, retire suavemente la sonda para asegurarse de que haya vaciado completamente la vejiga. Retire la sonda con cuidado.

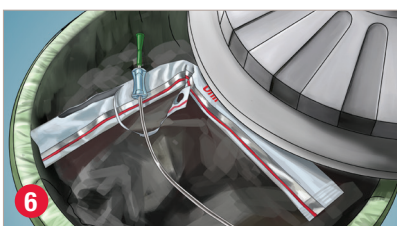

**6**  
El catéter se puede desechar en la basura. No la tire por el inodoro.



**7**  
Lávese las manos.

Mire el video instructivo de Onli para hombres:  
[www.hollister.com/en/onlimalesp](http://www.hollister.com/en/onlimalesp)

**ADVERTENCIA:** Para ayudar a reducir el riesgo de infecciones y/u otras complicaciones, no reutilice el producto.

**ADVERTENCIA:** En caso de sentir malestar o cualquier signo de lesión, interrumpa inmediatamente el uso del producto y consulte a su profesional de la salud.

- Sonda intermitente de un solo uso, lista para usar
- Sonda con recubrimiento hidrofílico sin ftalato
- 2 orificios de drenaje suaves
- Vía de drenaje con código de color
- No contiene látex de caucho natural
- Mecanismo guía en la sonda de 40 cm para una mejor inserción y como ayuda en la técnica de inserción no tocar

Esta sonda intermitente es un dispositivo tubular flexible que se inserta por la uretra y se utiliza en los pacientes masculinos, femeninos y pediátricos que necesiten eliminar la orina de la vejiga.

**PRECAUCIÓN:** Si presenta cualquiera de las situaciones descritas a continuación, por favor consulte a su profesional de la salud antes de utilizar este producto:

- Uretra seccionada
- Sangrado uretral de origen desconocido
- Estrechamiento uretral pronunciado
- Falsa vía uretral
- Uretritis – inflamación de la retra
- Prostatitis – inflamación de la próstata
- Epididimitis – inflamación del epidídimo (tubo testicular)

**PRECAUCIÓN:** La técnica del autocateterismo debe realizarse siguiendo las pautas y las recomendaciones de su profesional de la salud y sólo de acuerdo a las instrucciones de uso indicadas. Dado que el número de cateterizaciones varía en función de la persona, debería ser su médico quien determinara su frecuencia. Para cualquier otra pregunta sobre su cateterización, por favor, contacte con su médico.

**AVISO: Rx Only.** La ley federal (de EE.UU.) limita la venta de este dispositivo a médicos o bajo prescripción médica y a otros profesionales de la salud autorizados por la ley del estado a pedir este producto. Previo al uso de este dispositivo, asegúrese de leer (i) la información completa sobre cómo usar este dispositivo, incluidas las advertencias, precauciones e instrucciones de uso, y (ii) todos los demás prospectos y etiquetas del envase suministradas con el producto y sus accesorios.

**NOTA:** Almacenar las cajas en posición horizontal y a temperatura ambiente.

Este producto consta de: mecanismo guía de termoplástico (solamente para la sonda de 40 cm), vía de drenaje de polivinilcloruro y tubo sin ftalatos.



Hollister Incorporated  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

El logotipo de Hollister y Onli son marcas registradas de Hollister Incorporated.

©2019 Hollister Incorporated.  
US-00907