



سیستم کیسه‌های دوتکه

لوازم را جمع‌آوری کنید

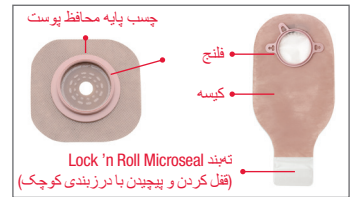


کیسه، چسب پایه محافظ پوست، کیسه دفع، دستمال کاغذی و/یا پارچه برای تمیز کردن را به همراه آب را آماده کنید. اختیاری: قیچی، خودکار، راهنمای اندازه‌گیری، و/یا لوازم جانبی.

چسب پایه محافظ پوست و کیسه را آماده کنید

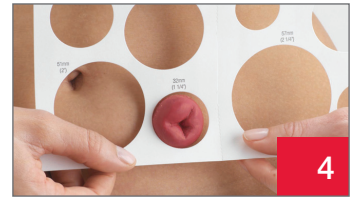

قبل از هر بار استفاده از چسب پایه محافظ پوست، استوما را با استفاده از راهنمای اندازه‌گیری استوما اندازه‌گیری کنید (اگر از دهانه چسب از قبل اندازه‌شده استفاده می‌کنید، به مرحله 7 بروید).

در صورت نیاز، خمیر یا حلقه اضافه کنید

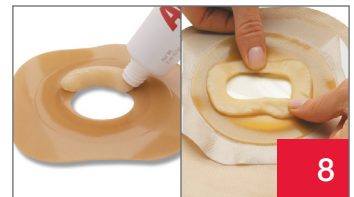

در صورت لزوم، با رعایت دستورالعمل‌های مصرف، از حلقه محافظ با لایه نازکی از خمیر در اطراف دهانه استفاده کنید.

سیستم کیسه‌های استفاده‌شده را بردارید



یک لایه چسب را با دقت بالا بیاورید و نوار محافظ آن را به سمت پایین جدا کنید و به آرامی پوست را به سمت بیرون چسب پایه محافظ پوست فشار دهید. کیسه و چسب پایه محافظ پوست استفاده‌شده را به‌طور مناسب دور بیندازید. آن را داخل توالت نیندازید.



دهانه اندازه چسب مشخص‌شده را روی چسب پایه محافظ پوست رسم کنید. چسب پایه محافظ پوست باید در محل تلاقی پوست و استوما قرار بگیرد. بررسی کنید که هیچ پوستی بین چسب پایه محافظ پوست و استوما دیده نشود تا از نشت ترشحات و ایجاد تحریک پوستی جلوگیری شود.

از سیستم کیسه‌های جدید استفاده کنید



دهانه چسب پایه محافظ پوست را به شکل لوزی روی مرکز استوما قرار دهید. برای چسب‌هایی با حاشیه نواری، پوشش کاغذی را از هر دو طرف بردارید و چسب را روی پوست فشار دهید.



ته کیسه را ببندید. اگر از کیسه قابل تخلیه‌ای استفاده می‌کنید، تعبند میکروسیل Lock 'n Roll را در پایین کیسه ببندید یا از گیره کیسه استفاده کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از این سیستم تعبند، به نکات مراقبت از تعبند میکروسیل Lock 'n Roll مراجعه کنید.

پوست را تمیز و خشک کنید



پوست را با آب یا صابون ملایم طبق توصیه متخصص مراقبت‌های سلامت تمیز کنید. کاملاً با آب بشویید و خشک کنید. از مواد روغنی، پودر، لوسیون یا صابون‌هایی از نوع لوسیون روی پوست استفاده نکنید.



با استفاده از قیچی منحنی کوچک، با دقت سوراخی را در چسب پایه محافظ پوست مطابق با الگو برش دهید. فراتر از خط روی لایه محافظ چسب نبرید.



برای اینکه چسب به بهترین شکل بچسبد، حدود یک دقیقه چسب پایه محافظ پوست را به‌صورت آرام فشار دهید.



دهانه

وضعیت پوست را بررسی کنید




بررسی کنید تا مطمئن شوید که پوست اطراف استوما (پریستوما) سالم و بدون تحریک، جوش یا قرمزی است.*

*اگر متوجه تحریک، جوش یا قرمزی شدید، با پرستار WOC/NSWOC خود تماس بگیرید.



لایه محافظ چسب را از چسب پایه محافظ پوست جدا کنید.

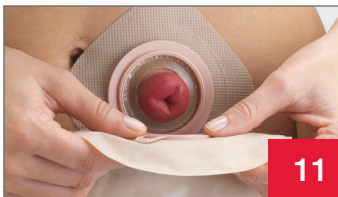

کیسه را به چسب پایه محافظ پوست بچسبانید؛ برای این کار، لبه‌های پایینی فلنج کیسه و فلنج چسب پایه محافظ پوست را به هم چفت کنید. دو فلنج را به هم فشار دهید. شنیدن چند صدای «تق» تأیید می‌کند که این کار را درست انجام می‌دهید. اگر صدای «تق» دیگر شنیده نشود، یعنی کیسه محکم شده است.

اگر از کیسه اوستومی استفاده می‌کنید، مطمئن شوید که دریچه تخلیه بسته است. علامت قطره روی دریچه تخلیه باید به آن سمت کیسه باشد که روی بدن قرار می‌گیرد.

در صورت تمایل، از درپوش ارائه‌شده درون جعبه استفاده کنید.

سیستم کیسه‌ای دوتکه

نکات	فهرست محصولات	شماره موجودی
<ul style="list-style-type: none"> • پوست اطراف استومای شما نباید دارای هیچ‌گونه علائم جوش یا زخم باشد • پوست تحریک‌شده باید توسط متخصص مراقبت‌های سلامت ارزیابی شود • اگر از حلقه یا خمیر محافظ استفاده می‌کنید، آن را طبق دستورالعمل، روی قسمت چسبنده چسب پایه محافظ پوست در کنار دهانه استوما قرار دهید • احتمالاً استومای شما پس از جراحی متورم خواهد شد. ممکن است چند هفته یا چند ماه طول بکشد تا استوما کوچک شود و به اندازه ثابتی برسد • ممکن است استوما هنگام تمیز کردن آن کمی خونریزی کند • استفاده از دستمال‌های مرطوب محافظ پوست زیر چسب‌های پایه با ماندگاری طولانی توصیه نمی‌شود، زیرا ممکن است این کار زمان ماندگاری کیسه را کاهش دهد 	<p>سیستم کیسه‌ای دوتکه</p> <p>چسب پایه محافظ پوست</p> <p>کیسه</p> <p>لوازم جانبی</p> <p>حلقه‌های محافظ</p> <p>کمربند استومی</p> <p>خمیر</p> <p>دئودورانت روان‌کننده</p> <p>پودر استوما</p> <p>سایر موارد</p>	<p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

دستورالعمل‌های تکمیلی

www.hollister.com

برای پرسش‌های مربوط به محصول، نیازهای نمونه‌گیری، یا پرسش‌های بالینی دقیق درباره محصولات ما در ایالات متحده، با **1.888.808.7456** تماس بگیرید. در کانادا، با **1.800.263.7400** تماس بگیرید.

قبل از استفاده از چسب پایه محافظ پوست، پوست باید تمیز و خشک باشد.

قبل از استفاده، حتماً دستورالعمل‌های استفاده را مطالعه کنید تا درباره موارد استفاده، موارد منع مصرف، هشدارها، اقدامات احتیاطی و دستورالعمل‌ها اطلاعات کسب کنید.

لوگو Hollister، Roll 'n Lock و "Healthy skin. Positive outcomes."، علائم تجاری Hollister Incorporated هستند.

© 2018 Hollister Incorporated. 923081-1118 US-00666