




# Sistema de bolsa de dos piezas Pouchkins

## Materiales

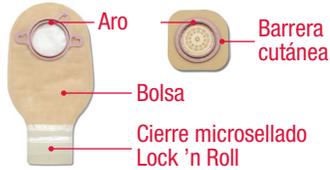

Bolsa colectora, barrera cutánea, tijeras, bolígrafo, agua y gasa, bolas de algodón o papel tisú.

## Preparación de la barrera cutánea y la bolsa



1 Mida el diámetro del estoma con una guía de medición de estoma antes de cada aplicación de barrera.



2 Trace el tamaño de la abertura determinada en la barrera cutánea. La barrera cutánea debe encajar en el punto de contacto entre la piel y el estoma. Compruebe que no se vea la piel entre la barrera cutánea y el estoma para evitar fugas e irritación de la piel.



3 Con tijeras curvas pequeñas, recorte cuidadosamente una abertura en la barrera cutánea que coincida con el patrón. No corte por fuera de la línea sobre el protector antiadherente.

## Retire el sistema de bolsa usado



4 Retire el protector antiadherente de la barrera cutánea. Déjela a un lado con el adhesivo hacia arriba.



5 Levante cuidadosamente un borde del adhesivo y despéguelo hacia abajo, desprendiendo la piel de la barrera cutánea delicadamente. Deseche adecuadamente la bolsa y la barrera cutánea usadas. No la arroje por el excusado.

## Limpie y seque la piel



6 Limpie la piel con agua o jabón suave según las indicaciones del profesional de la salud. Enjuáguela y séquela completamente. No aplique aceites, polvos, lociones ni jabones tipo loción sobre la piel.

## Aplique el nuevo sistema de bolsa



7 Centre la abertura de la barrera cutánea alrededor del estoma. Aplique una presión leve a la barrera cutánea alrededor de un minuto para lograr una mejor adherencia.



8 Conecte la bolsa a la barrera cutánea enlazando los bordes inferiores del aro de la bolsa y el aro de la barrera cutánea. Presione ambos aros para unirlos. Una serie de "clics" confirmarán que lo está realizando correctamente. Cuando ya no escuche ningún "clic", la bolsa se encontrará asegurada.



9 Cierre el extremo inferior de la bolsa. En caso de utilizar una bolsa drenable, cierre el extremo inferior de la bolsa con el cierre microsellado **Lock 'n Roll** o coloque una pinza para bolsa. Doble tres veces hacia arriba hasta que se unan las tiras plásticas. Presione firmemente desde el centro hacia los bordes exteriores a lo largo de la cinta de cierre.

## Consejos



• La piel alrededor del estoma no debe estar irritada ni lesionada. Si la piel está irritada, póngase en contacto con una enfermera o un enfermero que se especialice en el cuidado de heridas (o lesiones), ostomía, continencia/terapia enterostomal.



• Los adhesivos **Pouchkins** (incluidos en cada caja) se pueden colocar en la bolsa para identificar la fecha y hora en que se cambió la bolsa.



En caso de utilizar una bolsa para urostomía, asegúrese de que la válvula de drenaje se encuentre cerrada. El gotero de la válvula de drenaje debe quedar del lado de la bolsa que está en contacto con el cuerpo.

Si lo desea, colóquela la tapa que se incluye en la caja.

## Sistema de bolsa de dos piezas Pouchkins

### Uso de los accesorios (como lo indica su profesional de la salud)



La pasta se puede aplicar a la barrera cutánea antes de su aplicación.



Se pueden utilizar los anillos para rellenar las áreas de la piel que rodean al estoma como un reemplazo de la pasta.



Puede utilizar polvo para estoma cuando la piel se encuentra erosionada y húmeda.



Su enfermera puede recomendar el uso de un cinturón para ostomía. El cinturón debe estar firme pero no demasiado ajustado, y se debe usar en línea con el estoma. Consulte las instrucciones de uso.

### Instrucciones adicionales

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Información adicional

- **Cuidado de su hijo con ostomía** (manual educativo para padres y cuidadores de niños con ostomías)
- **¿Pueden seguir jugando y riendo?** (un libro para colorear para niños que quieran saber más sobre las ostomías)

Para solicitar una muestra, o si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas con respecto a nuestros productos en EE. UU., llame al **1.888.808.7456**.  
En Canadá, llame al **1.800.263.7400**.



**Hollister Incorporated**  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister Limited**  
95 Mary Street  
Aurora, Ontario L4G 1G3  
1.800.263.7400

Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.

Antes de usar cualquiera de los productos u accesorios de ostomía, asegúrese de leer todas las etiquetas y los prospectos del producto para conocer las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.