


Sistema de bolsa de dos piezas con protector cutáneo FormaFlex

Materiales

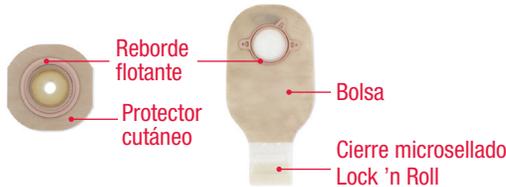

Prepare la bolsa, el protector cutáneo, la bolsa de residuos, un paño de papel o tela y agua para limpiar. Opcional: accesorios.

Retire el sistema de bolsa usado



3 Levante cuidadosamente una punta del adhesivo y despéguelo hacia abajo, desprendiendo delicadamente la piel del protector cutáneo. Deseche adecuadamente la bolsa y el protector cutáneo usados. No la arroje por el excusado.

Limpie y seque la piel



4 Limpie la piel con agua o con jabón suave según las indicaciones de un profesional de la salud. Enjuáguela y séquela completamente. No utilice aceites, polvos de talco, loción o jabones perfumados sobre la piel.

Preparación del protector cutáneo



1 Retire el papel antiadherente del protector cutáneo.



2 Apriete y estire el protector cutáneo para adaptarlo a la forma y el tamaño del estoma. **No lo enrolle.**

Aplique el protector cutáneo



5 Centre la abertura del protector cutáneo alrededor del estoma, en forma de diamante.



6 Alise y frote el material del protector cutáneo hacia el estoma para asegurar que no se pueda ver la piel periestomal y maximizar el efecto adhesivo.



7 En el caso de utilizar protectores con borde adhesivo, retire el papel protector de ambos lados y presione el adhesivo contra la piel.



8 Aplique la bolsa al protector cutáneo uniendo los bordes inferiores del reborde de la bolsa y el reborde del protector cutáneo. Presione ambos rebordes. Una serie de "clicks" confirmarán que lo está realizando correctamente. Cuando ya no escuche ningún "click", la bolsa se encontrará asegurada.



9 Aplique una leve presión al protector cutáneo por un minuto para una mejor adhesión.



10 Cierre el extremo de la bolsa. En caso de utilizar una bolsa drenable, cierre el extremo de la bolsa con el cierre microsellado **Lock 'n Roll** o coloque una pinza de bolsa. Consulte el consejo de cuidado del cierre microsellado **Lock 'n Roll** para obtener más información sobre cómo utilizar este sistema de cierre.



En caso de utilizar una bolsa para urostomía, asegúrese de que la válvula de drenaje se encuentre cerrada. El gotero de la válvula de drenaje debe quedar del lado de la bolsa que está en contacto con el cuerpo. Si lo desea, colóquela la tapa que fue incluida en la caja.

Sistema de bolsa de dos piezas con protector cutáneo FormaFlex

Consejos	Lista de productos	N.º de referencia
<ul style="list-style-type: none"> • Después de la cirugía, el estoma puede presentar hinchazón. Pueden pasar varias semanas o meses hasta que el estoma termine de encogerse. • Al limpiarlo, el estoma puede sangrar levemente. • La piel alrededor del estoma no debe tener ningún signo de erupción o herida. Consulte con un profesional de la salud en caso de tener la piel irritada. • Apriete y estire el protector cutáneo para adaptarlo a la forma y el tamaño del estoma. No lo enrolle. • Alise y frote el material del protector cutáneo hacia el estoma para asegurar que no se pueda ver la piel periestomal y maximizar el efecto adhesivo. 	Sistema de bolsa de dos piezas	
	Protector cutáneo	_____
	Protector cutáneo FormaFlex 1 3/4 in (44 mm)	14102
	2 1/4 in (57 mm)	14103
	2 3/4 in (70 mm)	14104
	Accesorios para bolsa opcionales	
	Anillos protectores (planos, convexos)	_____
	Cinturón para ostomía	_____
	Pasta	_____
	Desodorante lubricante	_____
	Polvo para estoma	_____
	Otros _____	_____

Preguntas frecuentes

P: ¿El protector cutáneo pierde adherencia si lo toco?

R: El protector cutáneo FormaFlex está diseñado para poder estirarse con las manos. Sin embargo, es importante que no manipule demasiado el producto, y que sus manos estén limpias y libres de lociones o polvos.

P: ¿Puede recortarse el protector cutáneo FormaFlex?

R: El protector cutáneo FormaFlex cumple su función aunque se recorte al tamaño adecuado.

P: ¿Qué ocurre si estiro demasiado el protector cutáneo?

R: Uno de los beneficios clave del protector cutáneo FormaFlex es que es muy flexible. Si se estira demasiado el material del protector cutáneo, simplemente alíselo y frótelo hacia el estoma para asegurar que no pueda verse la piel periestomal.

Para solicitar una muestra, si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas, llame al **1.888.808.7456** si se encuentra en EE. UU. En Canadá, llame al **1.800.263.7400**.

Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.

Antes de usar productos u accesorios de ostomía, asegúrese de haber leído todas las etiquetas y los prospectos del producto para conocer sus indicaciones, contraindicaciones, peligros, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.



Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, Illinois 60048
1.800.323.4060

www.hollister.com

Hollister Limited
95 Mary Street
Aurora, Ontario L4G 1G3
1.800.263.7400