



## Cierre microsellado Lock 'n Roll

### Objetivo

- Una bolsa drenable se abre en el extremo inferior para permitir el vaciado. Requiere un cierre en dicho extremo para mantenerla cerrada.
- Vacíe su bolsa cuando esté llena en un tercio o a la mitad de descargas o gas.
- El cierre microsellado **Lock 'n Roll** es un cierre integrado en una bolsa drenable.

Antes de colocar la nueva bolsa, cierre la cola de la bolsa (ver Figura 4 y Figura 5).



Figura 1

#### Abertura

Levantar del centro de la solapa transparente.

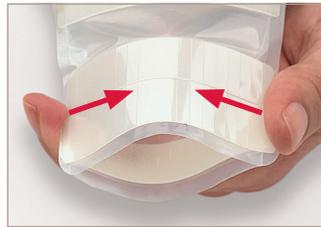


Figura 2

#### Drenado

Ubique los dedos a ambos lados de la cola de la bolsa, entre las bandas acanaladas, y apriete desde los lados. Mantenga la bolsa abierta para la limpieza.



Figura 3

#### Limpieza

Limpie y seque el interior de la cola de la bolsa. Limpie con una toallita el borde exterior de la cola de la bolsa.

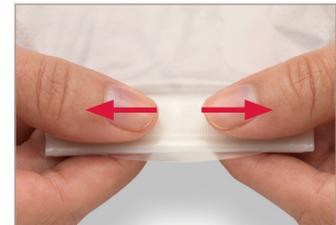
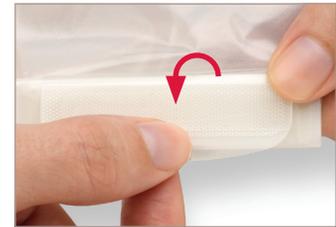


Figura 4 y Figura 5

#### Cierre

Doble estrechamente la cola de la bolsa tres veces. Doble la solapa hacia abajo y una los sujetadores en línea (Figura 4)

Para cerrar, comience por el centro y presione. Continúe presionando hacia los bordes exteriores. Sentirá que los sujetadores se unen para sellarse (Figura 5)

## Cierre microsellado Lock 'n Roll

### Preguntas frecuentes

**P: ¿Cómo sé si mi bolsa está bien cerrada?**

R: Al alinear y presionar el centro de la solapa de seguridad hacia los bordes exteriores podrá sentir que los sujetadores de bloqueo se sellan y se asegurará de que la bolsa está bien cerrada.

**P: ¿Funcionará el cierre si se humedece?**

R: El material utilizado en el cierre es resistente al agua y se puede cerrar de forma segura incluso cuando está mojado, pero funciona mejor cuando está seco.

**P: ¿El cierre se verá a través de mi ropa?**

R: El cierre se diseñó con un perfil delgado para que sea discreto y no puede verse debajo de la mayoría de las prendas.

**P: ¿El cierre es cómodo en contacto con mi cuerpo?**

R: El delgado perfil de la curva de salida está diseñada para ajustarse a las curvas naturales del cuerpo, proporcionando el máximo confort.

**P: ¿El cierre se abrirá accidentalmente?**

R: Las pruebas de laboratorio demostraron que las trabas interconectadas son seguras cuando se cierran de manera adecuada.

**P: Mis descargas son muy acuosas. ¿Existen sugerencias para facilitar el vaciado?**

R: Con el diseño único del cierre, quizá desee controlar el drenaje del líquido contenido desenrollando la cola de la bolsa dos veces y sosteniendo el último pliegue con la solapa hacia arriba. Luego, puede soltar lentamente este pliegue.

**P: ¿La gente me oír abrir la bolsa cuando necesite vaciarla en un baño público?**

R: El material utilizado en el cierre es silencioso y no hará un ruido de cierre común cuando se abra el pliegue de seguridad.

Para solicitar una muestra, o si tiene consultas sobre el producto o preguntas clínicas específicas con respecto a nuestros productos en EE. UU., llame al **1.888.808.7456**. En Canadá, llame al **1.800.263.7400**.

Se recomienda hacer un seguimiento de rutina con un profesional de la salud.

Antes de usar cualquiera de los productos o accesorios de ostomía, asegúrese de leer todas las etiquetas y los prospectos del producto para conocer las indicaciones, contraindicaciones, riesgos, advertencias, precauciones e instrucciones de uso.



**Hollister Incorporated**  
2000 Hollister Drive  
Libertyville, Illinois 60048  
1.800.323.4060

[www.hollister.com](http://www.hollister.com)

**Hollister Limited**  
95 Mary Street  
Aurora, Ontario L4G 1G3  
1.800.263.7400