


REF 5551



en High Output Collection Bag

ja 廃液バッグ

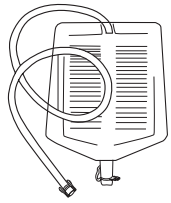

www.hollister.com/symbolglossary



912717

Hollister Incorporated
2000 Hollister Drive
Libertyville, IL 60048 USA

Hollister ULC
Foxford Road, Ballina
Co. Mayo, Ireland

EC REP



©2020 Hollister Incorporated.
912717-920

en INSTRUCTIONS FOR USE

Contents

- High output collection bag with tubing and attached connector.
- Hanger

Product Description: High output collection bag that connects directly to a Hollister high output drainable ostomy pouch without the need for additional connectors. Features punch holes for attachment to a nightstand or bed hanger. Designed to be emptied. Hanger fixation to support a collection or night drainage bag. Most suitable for colostomies or ileostomies including high output stomas or post-operative use.

Product is made of polymer/copolymer plastics, and nonwoven fabric.

Indications and Intended Use: This product is an accessory to an ostomy pouching system intended to collect output from Hollister high output drainable ostomy pouches. The hanger is an accessory intended to secure a collection or night drainage bag to a bed frame or a stand.

WARNINGS

Disinfection and sterilisation (sterilization) may compromise the product. This may result in odour (odor) or leakage.

Precaution

Single patient – multiple use. Empty then rinse bag and tubing with clean water, and hang to dry. Wipe outside of bag and tubing with damp cloth as needed. Discard when visibly damaged or stained. Sharing this product with multiple users creates risk of infection.

Notes: Contact a stoma care nurse or healthcare practitioner for help with the ostomy pouching system or skin irritation. In case of serious injury (incident) in relation to your use of the product, please contact your local distributor or manufacturer and your local competent authority. For more information, see www.hollister.com/authority or contact EC Rep or local distributor.





Single patient – multiple use.



Medical Device (as applicable).


Not made with natural rubber latex.
CE mark as required

To connect to a high output drainable ostomy pouch

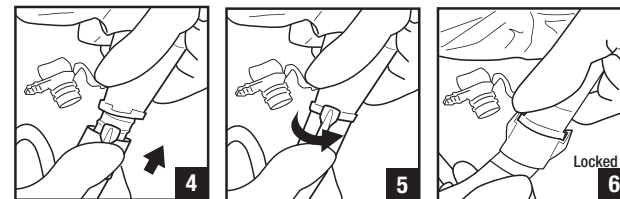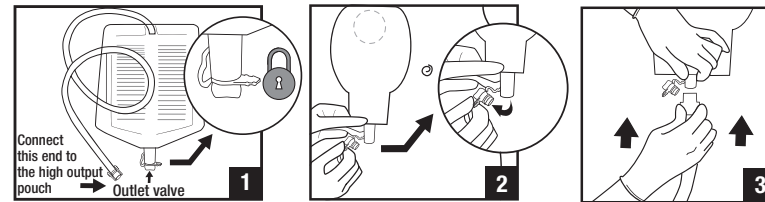


Applying the hanger fixation

Please keep the bag off the floor. Discard when visibly damaged or stained.

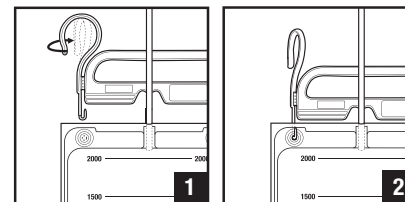


To drain and close

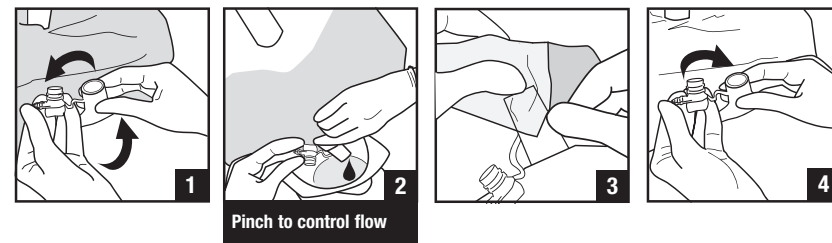

To remove and dispose (Please follow all local disposal regulations)

Remove hanger fixation

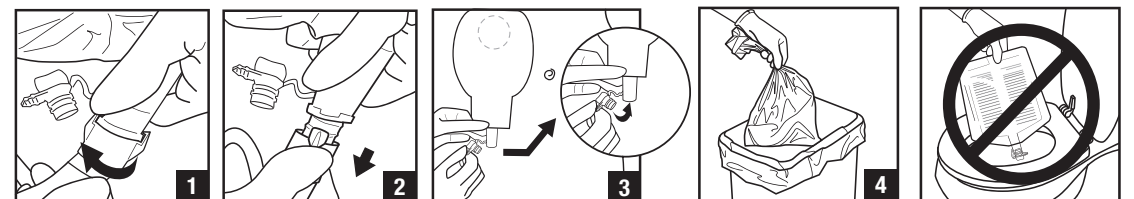

For reference only. Unauthorized use, disclosure or copying is prohibited.

同梱品

- チューブと接続コネクタを備えた廃液バッグ。
- ハンガー

製品概要: ホリスターの消化管用キャップ式開放型ストーマ袋に直接接続できる廃液バッグです。（接続用コネクタを別途ご用意いただく必要はございません。）ベッドサイドテーブルやベッドハンガーに取り付けるための穴が開いています。排泄物を溜めて排出できるよう設計されています。流動性の高い便に最適です。廃液バッグや夜間用ドレナージバッグはハンガーに吊り下げ使用します。排泄量の多いコロストミー、イレオストミー、術後の使用に最適です。

本品はプラスチック（ポリマー／コポリマー）、不織布で構成されています。

適応および使用目的: 本品は、ストーマ装具用のアクセサリです。排泄物を溜めるためにホリスターの消化管用キャップ式開放型ストーマ袋に接続し使用します。このハンガーは、廃液バッグや夜間用ドレナージバッグをベッドフレームまたはスタンドに吊り下げるための付属品です。

警告

消毒、滅菌を行うと本品の品質が損なわれる可能性があります。これにより、臭いや漏れを引き起こすことがあります。

注意事項

一人の患者さんに複数回使用できます。バッグを空にして、バッグとチューブをきれいな水ですすいでから、吊るして乾燥させます。必要に応じて、湿らせた布でバッグやチューブの表面を拭きます。損傷や汚れが目で見えて確認できる場合は廃棄してください。複数の利用者による本品の使い回しは感染症のリスクを引き起こします。

注: ストーマ装具または皮膚トラブルでお困りの場合は、ストーマケア担当の看護師または医療従事者に連絡を取り、相談してください。本品の使用に関連する重大な傷害（事故）が発生した場合は、最寄りの販売店もしくは製造元、または地域の監督当局にご連絡ください。詳細については、www.hollister.com/authorityを参照するか、ECの担当者または最寄りの販売店にお問い合わせください。





一人の患者さんに複数回使用できます。



医療機器
(該当する場合)


本製品は天然ゴム（ラテックス）を使用しておりません。
CEマーク適合

ホリスターの消化管用キャップ式開放型ストーマ袋に接続するには

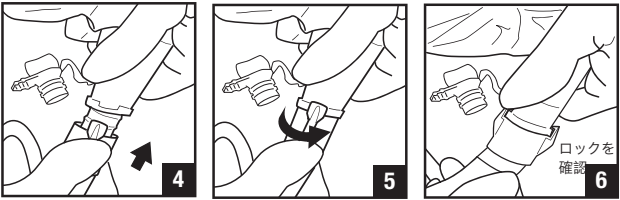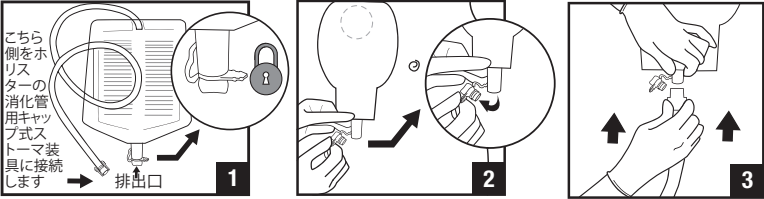

ハンガーで吊り下げる

ストーマ袋が床に付かないようにしてください。損傷や汚れが目で見えて確認できる場合は廃棄してください。

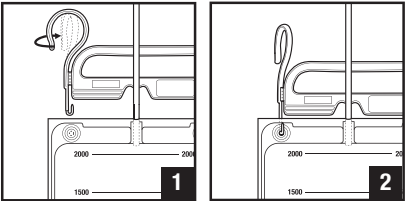

排出し、排出口を閉じる



取り外し破棄する（ゴミの分別については各自治体の方針に従ってください）

ハンガーを取り外す

