

A Hollister Technology
.....

FormaFlex

Hautschutzplatte



Einfach in Form.

 Hollister


Ein Meilenstein in Sachen Hautschutz.



Komfort und Vielseitigkeit in einem

Die formbare FormaFlex Hautschutzplatte bietet eine sichere Lösung in der Stomaversorgung – einfach anzuwenden und individuell anpassbar.

- Sie kann einfach geformt und immer wieder neu in Form gebracht werden.
- Sie behält ihre Form und schützt zuverlässig die Haut.
- Sie passt sich den Körperbewegungen des Trägers an.
- Sie ist selbst bei eingeschränkter Fingerfertigkeit leicht anzuwenden.

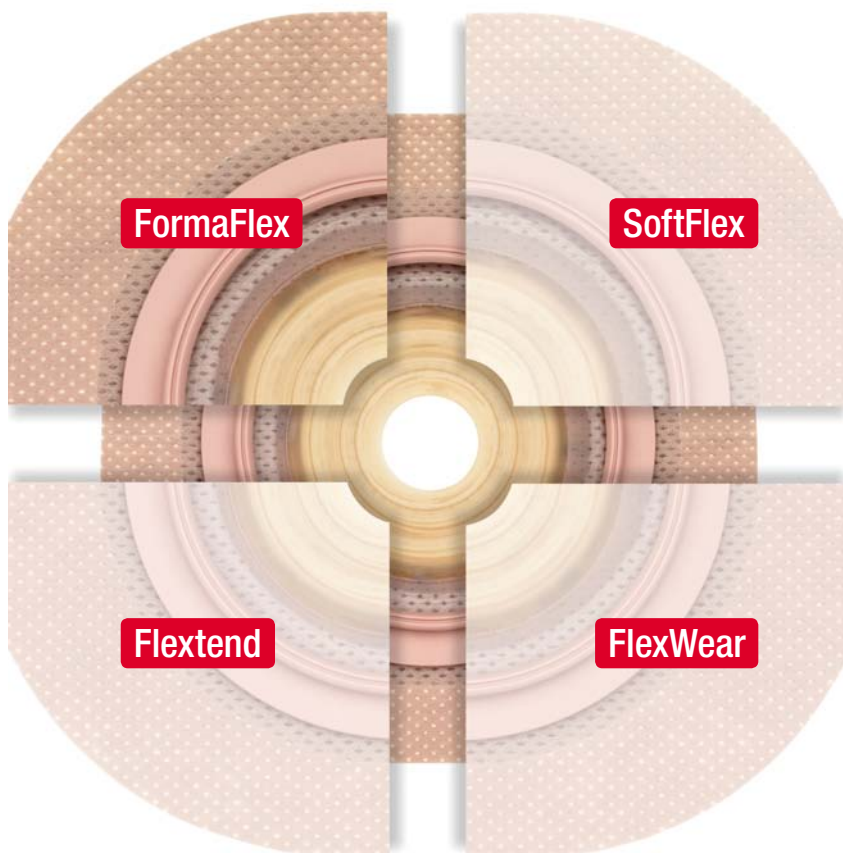

Die FormaFlex Hautschutzplatte bietet eine weitere Wahlmöglichkeit innerhalb der Hollister Hautschutz-Familie – für eine Stomaversorgung ganz für Ihren individuellen Anspruch.

FormaFlex Hautschutzplatte

Hollister präsentiert stolz das neueste Mitglied seiner Hautschutz-Familie: **FormaFlex**, die **formbare Hautschutzplatte**. Diese speziell entwickelte Hollister-Technologie bietet Patienten eine komfortable und leicht anwendbare Lösung für eine optimale und vor allem individuelle Passform.


Dank der neuen **Formulierung** der FormaFlex Hautschutzplatte kann das Material einfach gedehnt und wiederholt mit den Händen geformt werden.

**Es ist kein Abmessen, kein Markieren
und kein Ausschneiden notwendig!**

Ohne diese zusätzlichen Schritte wird das Erlernen einer optimalen Anwendung der Stomaversorgung vereinfacht und zeitsparend. Dabei erlaubt die Hautschutzplatte eine Versorgung von Stomata in vielen verschiedenen Größen und Formen – unter Einsatz von nur wenigen Produkten.

Einfach in Form.



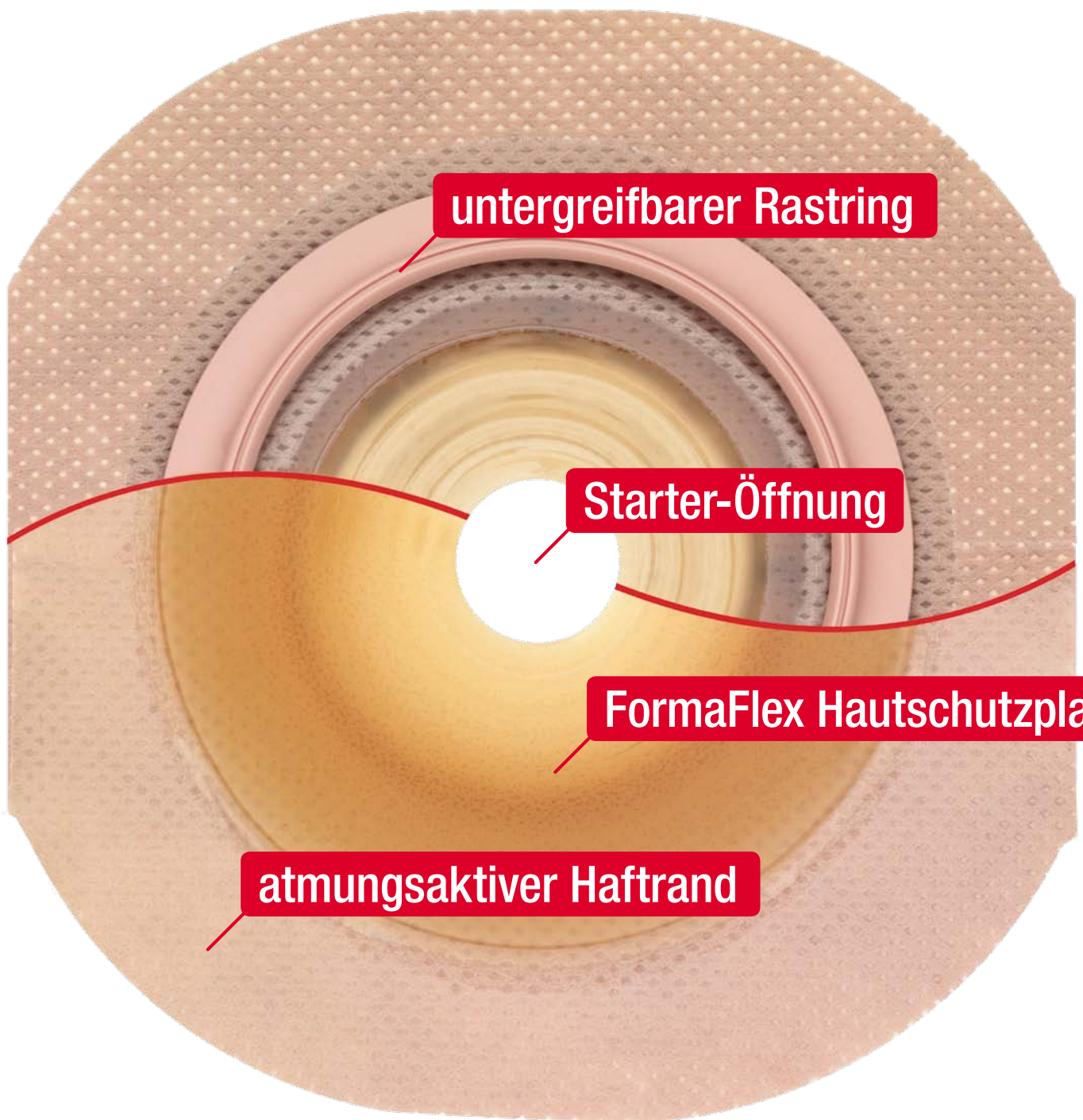

untergreifbarer Rastring

Starter-Öffnung

FormaFlex Hautschutzplatte

atmungsaktiver Haftrand

Einzigartiges Design

Die äußere Beschichtung sowie die kreisförmigen, fühlbaren Erhöhungen der FormaFlex Hautschutzplatte unterstützen das Formen des Materials mit der Hand.



Der Hautschutz kann dadurch noch einfacher an die individuelle Größe und Form des Stomas angepasst werden. Die äußere Beschichtung ist flexibel und leicht elastisch.

Diese Eigenschaften sorgen dafür, dass sich das Hautschutzmaterial dehnen lässt und anschließend die gewünschte Form behält. Es nimmt Feuchtigkeit sicher auf, ist stabil gegen Erosionen und schützt die Hautschutzplatte vor dem Zusammenkleben mit der Folie des Beutels.




Die kreisförmigen Erhöhungen auf der Hautschutzplatte steigern die Flexibilität des Materials und erleichtern so zusätzlich das Formen.

Spezielle Formulierung

Das Material der FormaFlex Hautschutzplatte besteht aus einer speziellen Zusammensetzung von **weichen, flexiblen Mikrofasern, einer besonderen Mischung hydrokolloider Bestandteile und Elastomeren**.

- **Mikrofasern** stärken das FormaFlex Hautschutzmaterial gegen Erosionen – ohne dass es an Formbarkeit einbüßt.
- **Hydrokolloide Bestandteile** sorgen dafür, dass Feuchtigkeit absorbiert und die Haut, die das Stoma umgibt, sicher geschützt wird.
- **Elastomere** gewährleisten zuverlässige Haftung und einen sicheren Sitz auf dem Abdomen.

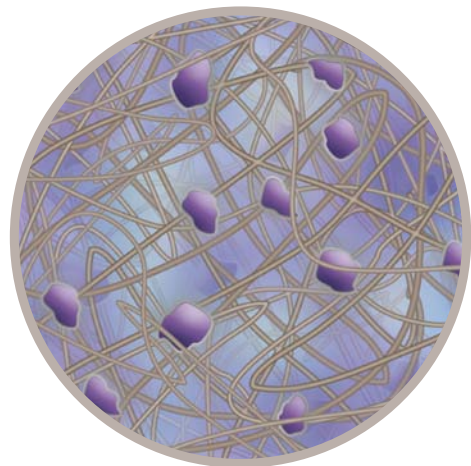

Mikroskopische Darstellung der FormaFlex Hautschutz-Formulierung.

Das Design der FormaFlex Hautschutzplatte bietet...

- ... eine spezielle Formulierung, die mit der Hand gedehnt und geformt werden kann.
- ... einen atmungsaktiven und flexiblen Haftrand für zusätzliche Sicherheit.
- ... einen untergreifbaren Rastring, der Druck auf die Bauchdecke vermeidet.

Die FormaFlex Hautschutzplatte ist eine komfortable und sichere Lösung für den individuellen Anspruch – egal ob mit einem geschlossenen Beutel, offenen Beutel oder Urostomiebeutel.

Conform 2 FormaFlex

Basisplatte plus Haftrand

HMV: 29.26.05.0xxx^{1*}

HMV: 29.26.05.1xxx^{2*}



- Formbares, erosionsbeständiges Hautschutzmaterial zur individuellen Anpassung an Stomagröße und -form



- Mit flexiblem, atmungsaktivem Haftrand für mehr Sicherheit
- Untergreifbarer Rastring
- Zentrumverschluss

Stoma in mm	RR Ø in mm/ Farbcode	Bestell-Nr.	Pharma-Zentral-Nr.	Inhalt/ Packung
16-32	45 ●	34700 ¹	8440218	5
16-43	55 ●	35700 ¹	8440224	5
16-57	70 ●	37700 ²	8440230	5

* Die Aufnahme dieser Produkte in das Hilfsmittelverzeichnis wurde beantragt.

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung für Betroffene:
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.deutschland@hollister.com

www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Heinrich Collin-Straße 1
A-1140 Wien

Beratung:
Telefon: 0 800/80 81 88 - gebührenfrei
Telefax: 01/8 77 08 00-22

Bestellung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

www.hollister.at

Schweiz

Hollister
Bernstraße 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 044/730 45 05
Telefax: 044/730 54 44
Mo.–Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr
E-Mail: info@hollister.ch

Hollister Stomaversorgung.
Auf die Details kommt es an.

 **Hollister**
www.hollister.com

Ein Meilenstein in Sachen Hautschutz.