

Conform 2

Zweiteilige Stomaversorgung

Mit Sicherheit flexibel




Conform 2 – in jeder Situation sicher und flexibel

Mit unserem zweiteiligen Stomaversorgungs-System können Sie sich Ihre Versorgung individuell zusammenstellen. Die **große Auswahl an Basisplatten** – ob plan, konvex oder mit Haftrand – ermöglicht einen **perfekten Sitz** auf der Haut und schützt Sie maximal vor Unterwanderungen.

Dabei sichert die breite Auswahl an Kolostomie-, Ausstreif- und Urostomiebeuteln jederzeit eine diskrete Versorgung, die höchsten Ansprüchen an Tragekomfort gerecht wird.

Besondere Eigenschaften der Conform 2 Basisplatten

Zentrumverschluss

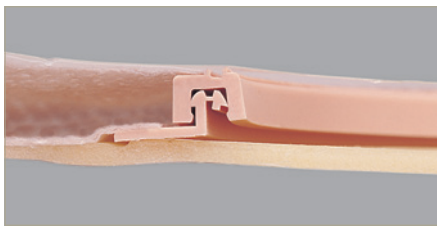

- Verhindert ungewolltes Ablösen des Beutels
- Ein hörbarer Klick beim Verschließen zeigt, dass das System sicher verriegelt ist

Untergreifbarer Rastring



- Vereinfacht das Anbringen des Beutels ohne Druck auf die Bauchdecke
- Ideal auch für die postoperative Versorgung

Conform 2 Basisplatten plus Haftrand, plan und konvex – in höchstem Maße ...

... sicher


Sie haften perfekt auf der Haut und bieten maximalen Schutz vor Unterwanderungen.

... komfortabel und diskret

Die extreme Leichtigkeit im Vergleich zu anderen Basisplatten trägt zu höherem Tragekomfort und noch mehr Diskretion bei.

... hautfreundlich

Der Haftrand ist erwiesenermaßen hautfreundlich und atmungsaktiv.

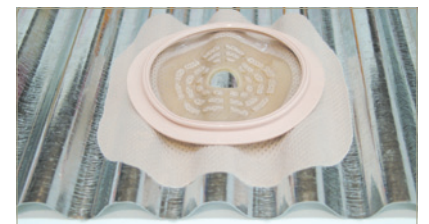

Conform 2 Basisplatten zur sicheren Versorgung jeder Stomaanlage – ob plan, konvex oder mit Haftrand

Conform 2 Basisplatten plan



- Extrem dünne Versorgung, selbst unter leichter Kleidung zu tragen
- Ideale Körperanpassung durch flexible Hautschutzplatte

Conform 2 Basisplatten konvex




- Gewölbter Hautschutz zur Versorgung von Stomata auf oder unter Hautniveau
- Ideale Anpassung an die Stomakonturen für zuverlässigen Schutz vor Unterwanderungen

Conform 2

Zweiteilige Stomaversorgung



Für jede Stomaart und jede Lebenssituation den passenden Beutel

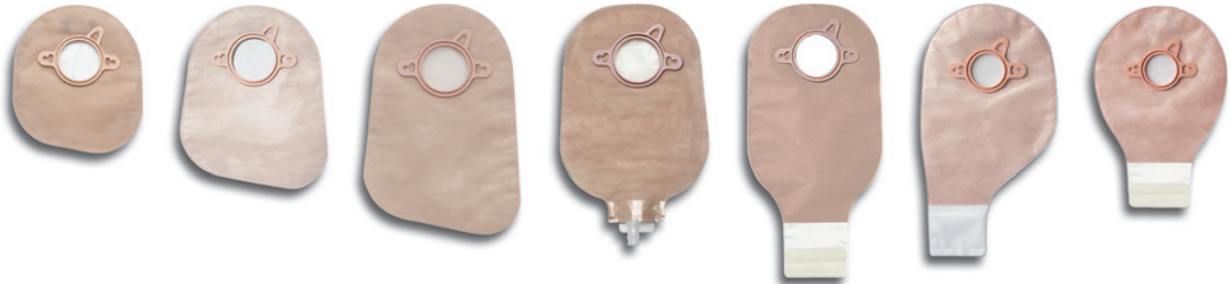

- Hoher Tragekomfort durch **weiche Vliesbeschichtung**, wahlweise beidseitig oder körperseitig
- Eine **körpergerechte Form** und **geräuscharme Folie** erfüllen höchste Ansprüche im Hinblick auf Tragekomfort und Diskretion


Für Kolostomie- und Ileostomie-Betroffene

- Integrierter innovativer **AF300 Filter** zum Neutralisieren von Gerüchen
- Für jede Lebenssituation die **passende Beutelgröße** – ob mini, midi, oder maxi
- **Integrierter Lock 'n Roll Verschluss** bei Ausstreifbeuteln ermöglicht ein Schließen ohne Klammer und erleichtert so die Handhabung

Für Urostomiebetreffene

- Urostomiebeutel mit **integrierter Rücklaufperre**
- **Ablasshahn** einfach durch drehbares Ventil zu bedienen (klare Kennzeichnung mit Tropfensymbol)
- Beiliegender Adapter für den Anschluss einer großvolumigen Tages- und Nachtversorgung

Innovativer AF300 Filter

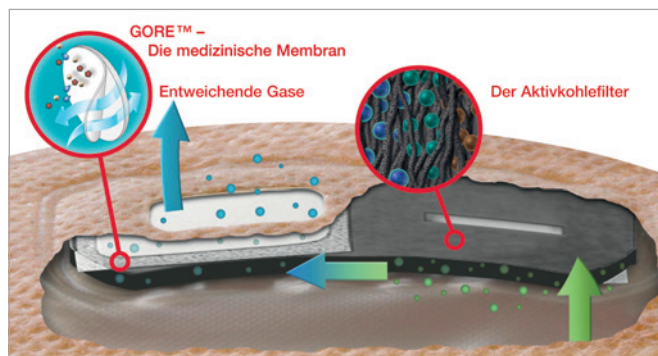

In allen geschlossenen und Ausstreifbeuteln

- Gerüche werden durch die 300 mm² große Fläche zuverlässig neutralisiert
- Die GORE™ Membran verhindert ein Aufblähen des Beutels sowie eine Vakuumbildung
- Der Filter ist durch die GORE™ Membranen innen wie außen sicher vor dem Eindringen von Flüssigkeiten geschützt, der Filter muss nicht mehr abgeklebt werden

Haben wir Ihr Interesse geweckt, und Sie möchten mehr über unsere Produkte erfahren?

Wir freuen uns von Ihnen zu hören, wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, und selbst dann, wenn Sie einfach nur mal neugierig sein möchten. Sie erreichen uns telefonisch unter der kostenfreien Rufnummer 0 800/4 65 54 78 (Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr) oder per E-Mail unter der Adresse hollister.deutschland@hollister.com. Unser kompetentes Beratungsteam ist gerne für Sie da!

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung für Betroffene:
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.deutschland@hollister.com

www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Heinrich Collin-Str. 1
A-1140 Wien

Beratung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22

Bestellung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr, Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

Schweiz

Hollister
Zürcherstrasse 20
CH-8952 Schlieren

Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 044/730 45-05
Telefax: 044/730 54-44
Mo.–Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr
E-Mail: info@hollister.ch